



HeartSine

Saver EVO®



Data management Software
for samaritan® PAD & PDU

samaritan® PAD & PDU
Guide d'utilisation du logiciel Saver EVO®

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis et n'engagent en rien la responsabilité de HeartSine Technologies. Aucune section de ce guide ne peut faire l'objet de reproduction totale ou partielle ou transmission sous quelque forme que ce soit, de manière électronique ou mécanique, y compris par photocopie ou enregistrement à des fins quelconques, sans l'autorisation expresse écrite de HeartSine Technologies.

Copyright© 2014 HeartSine Technologies. Tous droits réservés.

« samaritan » est une marque déposée de HeartSine Technologies.

« Saver » et « SCOPE » sont des marques commerciales de HeartSine Technologies.

Toutes les autres marques commerciales et marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Saver EVO® 2014

HeartSine Technologies Ltd.

Canberra House
203 Airport Road West
Belfast
BT3 9ED
Irlande du Nord



Téléphone : +44 28 9093 9400 • Fax : +44 28 9093 9401
Site web : www.heartsine.com • E-mail : support@heartsine.com


French
H013-001-302-3

MODE D'EMPLOI DU LOGICIEL Saver EVO

Le logiciel Saver EVO permet de récupérer les données des événements de défibrillation du samaritan PAD et de la carte-mémoire du PDU. Le logiciel Saver EVO permet également de gérer les données qui ont été sauvegardées sur votre PC pour les imprimer ou encore les importer et les exporter sur d'autres logiciels Saver et Saver EVO.







Le logiciel Saver EVO est fourni avec une licence permettant l'installation et l'usage de ce dernier sur un PC unique.

Télécharger à partir du site Web

1. Se rendre sur <http://heartsine.com/support/system-updates/> et cliquer sur le lien « Download » (Télécharger) sous « Saver EVO Software » (Logiciel Saver EVO).
2. Après le téléchargement, exécuter «  SaverEVO_setup.exe » pour installer Saver EVO. (Suivre les instructions portées à l'écran.)
3. Veuillez lire la licence d'utilisation. Pour installer ce logiciel, vous devez accepter les termes et conditions de la licence. Pour les accepter, cliquez sur le bouton « suivant ».
4. Le logiciel Saver EVO sera automatiquement installé dans son mode de configuration standard dans le répertoire par défaut. Cliquez sur « J'accepte » pour continuer. Les réglages par défaut ne doivent pas être modifiés à moins que vous ne soyez un utilisateur expérimenté.
5. Si une certification pilote vous est demandée, cliquez sur le bouton « Continuer ».

INSTRUCTIONS RAPIDES

Pour récupérer les données des événements de défibrillation enregistrées sur le samaritan PAD, sur la batterie du samaritan AED Data-Pack ou encore sur la carte-mémoire du PDU :

1. Connectez l'appareil en question au PC.
2. Lancez le logiciel Saver EVO.
3. Cliquez sur le bouton  ou sur le bouton .
4. Cliquez sur le bouton  pour afficher la liste des événements enregistrés.
5. Sélectionnez l'évènement voulu parmi ceux de la liste.
6. Cliquez sur le bouton  pour visualiser l'évènement.
7. Cliquez sur le bouton  et entrez les informations relatives au patient comme indiqué pour sauvegarder l'évènement sur le PC.
8. Si nécessaire, cliquez sur le bouton  pour imprimer l'enregistrement relatif à l'évènement.

UTILISATION DU LOGICIEL Saver EVO

L'utilisation du logiciel Saver EVO est très simple grâce à ses boutons intuitifs. L'écran de démarrage du logiciel Saver EVO ci-dessous apparaîtra :



Ecran de démarrage sur Saver EVO



samaritan PAD – Pour ouvrir le menu des fonctions spécifiques au PAD. Pour plus de détails, voir page 5.



PDU – Pour ouvrir le menu des fonctions spécifiques au PDU. Pour plus de détails, voir page 12.



Gérer les évènements enregistrés – Pour ouvrir le menu des fonctions spécifiques aux évènements enregistrés sur le PC. Pour plus de détails, voir page 16.



Quitter le logiciel – Pour quitter le logiciel Saver EVO.



Modifier les paramètres du logiciel – Pour changer le mot de passe ou la langue du logiciel Saver EVO. Permet de visualiser les informations relatives à la révision du logiciel Saver EVO.

L'utilisation des menus spécifiques mentionnés ci-dessus sera plus détaillée dans les sections suivantes.

UTILISATION DU LOGICIEL Saver EVO AVEC LE samaritan PAD

Pour utiliser le logiciel Saver EVO avec le samaritan PAD, vous aurez besoin du câble USB fourni avec le PAD ou le logiciel Saver EVO.

Connectez le câble USB au samaritan PAD et au port USB de votre PC. Lancez le logiciel Saver EVO.



Cliquez sur le bouton 'samaritan PAD' pour accéder à l'écran ci-dessous :



Ecran d'accès au PAD sur Saver EVO



Données du PAD – Pour récupérer les données des événements de défibrillation du PAD. Pour plus de détails, voir page 6.



Modifier les paramètres du PAD – Pour exécuter des tests de diagnostic ou modifier la configuration (volume, langue ou heure) du samaritan PAD. Pour plus de détails, voir page 8.



Retour – Pour revenir à l'écran de démarrage du logiciel Saver EVO.

RECUPERATION DES DONNEES DES EVENEMENTS DE DEFIBRILLATION DU samaritan PAD

Pour récupérer les données des évènements de défibrillation du samaritan PAD, assurez-vous que votre samaritan PAD est bien connecté au PC, puis cliquez sur le bouton 'Données du PAD'



Cela permettra de consulter la mémoire du PAD et de lister tous les évènements enregistrés tout en les affichant comme ci-dessous :



Ecran des évènements du PAD sur Saver EVO

Les évènements indiqués en vert et précédés du symbole ✓ sont les évènements déjà enregistrés sur le PC.



Tout enregistrer – Pour enregistrer sur le PC tous les évènements listés sur le PAD dans un fichier unique.

N.B. Les évènements enregistrés de cette façon ne peuvent pas être récupérés et visualisés avec cette version du logiciel Saver EVO. Pour récupérer les évènements de ce fichier, contactez le service d'assistance à la clientèle de HeartSine Technologies. Pour enregistrer les évènements individuellement de façon à les retrouver ultérieurement, se reporter à la fonction « Save » (Enregistrer) de la VISUALISATION DES EVENEMENTS DE DEFIBRILLATION DU samaritan PAD à la page 7.



Afficher – Pour visualiser l'évènement sélectionné.



Supprimer / Effacer – Pour supprimer tous les évènements listés sur le PAD. Pour plus de détails, voir page 8.



Retour – Pour revenir à l'écran d'accès au PAD du logiciel Saver EVO.


VISUALISATION DES EVENEMENTS DE DEFIBRILLATION DU samaritan PAD

Pour visualiser un évènement, sélectionnez l'évènement voulu parmi ceux de la liste puis cliquez sur



le bouton 'Afficher'

L'évènement de défibrillation avec tracé ECG et la liste des évènements s'afficheront sur le même écran.

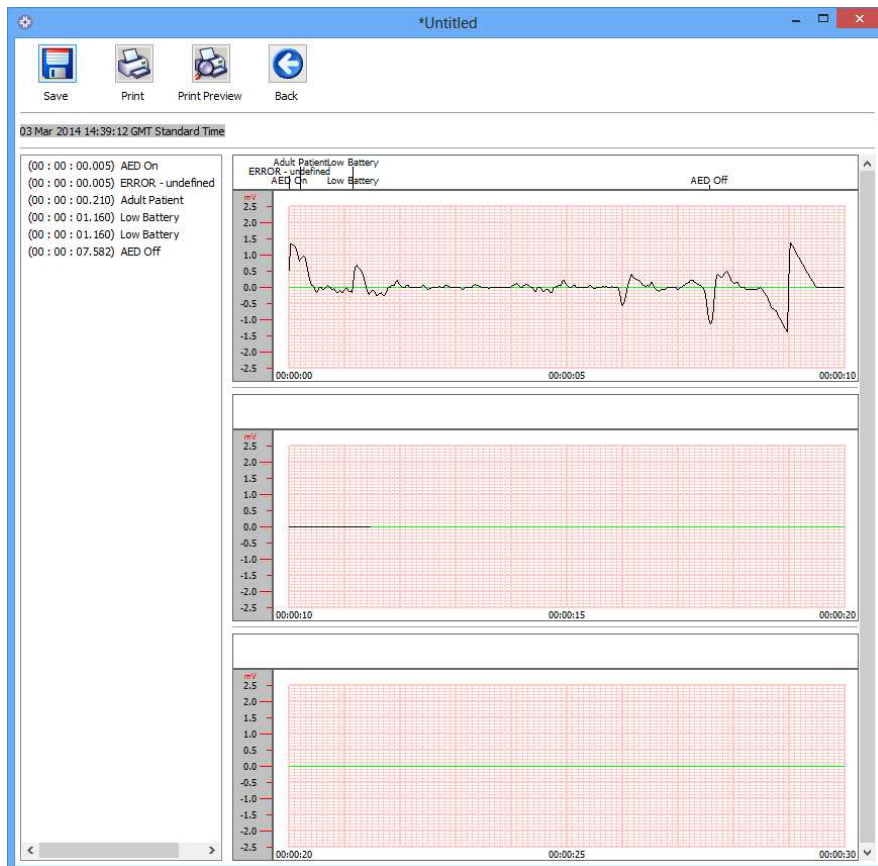

Ecran d'affichage des évènements du PAD sur Saver EVO

Vous pouvez maintenant choisir d'enregistrer l'évènement affiché sur le PC en cliquant sur le bouton



'Enregistrer'. Les évènements enregistrés de cette façon peuvent être récupérés et visualisés avec le logiciel Saver EVO. A ce stade vous pourrez entrer des informations sur le patient pour pouvoir l'identifier sur la liste des évènements sauvegardés. Les informations relatives au patient peuvent être composées de caractères alpha numériques, et chaque champ peut être complété ou laissé vierge si nécessaire.

Ecran des informations patient sur Saver EVO

N.B. Une fois les données de l'évènement de défibrillation enregistrées sur votre PC, elles ne pourront pas être modifiées.

L'écran d'affichage des événements du logiciel Saver EVO contient également les boutons suivants :



Imprimer événement – Pour imprimer l'évènement en cours de visualisation sur l'écran d'affichage.



Aperçu avant impression – Pour obtenir un aperçu des données à imprimer affichées à l'écran.



Retour – Pour revenir à l'écran des événements du logiciel Saver EVO.

EFFACEMENT DE LA MEMOIRE DU samaritan PAD



Pour effacer la mémoire du samaritan PAD, cliquez sur le bouton 'Supprimer / Effacer'.

Par précaution, le logiciel Saver EVO vous demandera votre mot de passe avant l'effacement de la mémoire. Une fois le mot de passe correct entré, la mémoire du samaritan PAD sera effacée. Pour obtenir des informations sur la façon de modifier le mot de passe par défaut, se reporter à MODIFICATION DU MOT DE PASSE ET DE LA LANGUE DU LOGICIEL Saver EVO à la page 18.

Attention : HeartSine recommande de sauvegarder l'ensemble de la mémoire sur votre ordinateur avant de l'effacer. Ces informations devraient être stockées en toute sécurité pour référence future.

Il est recommandé d'effacer les événements de la mémoire du PAD dont les données ont été récupérées depuis le samaritan PAD et sauvegardées sur le PC. Cela permet de garantir que la mémoire soit entièrement disponible pour enregistrer les données d'un autre événement de défibrillation.

MODIFICATION DES PARAMETRES DU samaritan PAD



Le bouton 'Modifier les paramètres du PAD' permet de configurer certaines fonctions du samaritan PAD comme suit :

- Vérifier / Régler l'heure
- Exécuter des tests de diagnostic

D'autre part, les utilisateurs bénéficiant des autorisations nécessaires peuvent également modifier :

- Volume
- Langue
- Activer / Désactiver le son du métronome



Cliquez sur le bouton 'Modifier les paramètres du PAD' pour accéder à l'écran suivant (voir page suivante) :



Ecran de modification des paramètres du PAD sur Saver EVO



Vérifier / Régler l'heure du PAD – Pour synchroniser l'heure du samaritan PAD à celle de votre PC.



Ecran de vérification / réglage de l'heure du PAD sur Saver EVO

Cliquez sur le bouton 'Synchroniser' pour mettre le samaritan PAD à l'heure du PC auquel il est connecté.

Cliquez sur le bouton 'Fermer' pour revenir à l'écran de modification des paramètres du PAD du logiciel Saver EVO.



Exécuter des tests de diagnostic – Pour exécuter des tests simples servant à vérifier que le samaritan PAD fonctionne correctement. La liste des tests de diagnostic disponibles est accessible à partir du menu déroulant de l'écran s'ouvrant à partir de ce bouton ci-dessous :



Ecran des tests de diagnostic du PAD sur Saver EVO




Modifier la configuration du PAD – Ce bouton permet aux utilisateurs de visualiser les paramètres actuels du volume, de la langue et du métronome du PAD relié ainsi que la version du logiciel installé. La fenêtre PAD Configuration (voir ci-dessous) peut être utilisée pour modifier le volume, la langue ou pour activer ou désactiver le son du métronome. Ces modifications ne peuvent être confirmées qu'en saisissant le mot de passe lorsqu'il est demandé. Pour obtenir des informations sur la façon de modifier le mot de passe par défaut, se reporter à MODIFICATION DU MOT DE PASSE ET DE LA LANGUE DU LOGICIEL Saver EVO à la page 18.



Ecran de configuration du PAD sur Saver™ EVO

On accède aux options de langue à l'aide d'un menu déroulant (le choix des langues peut être limité à celles programmées au niveau de l'appareil et/ou au pays dans lequel l'appareil a été acheté).

En cas de modification de la langue, vérifier que la fenêtre de confirmation apparaît, comme celle présentée ci-dessous. Si ce message n'apparaît pas à la fin de la programmation, contactez votre distributeur HeartSine agréé ou directement HeartSine.

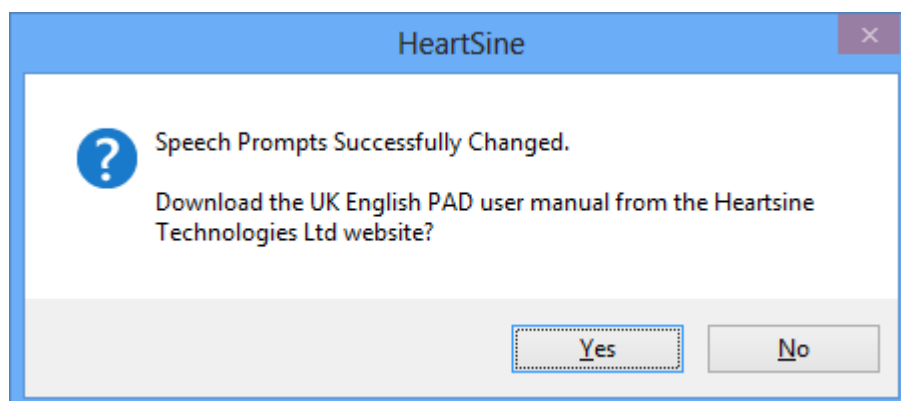

Et vérifier que la langue a bien été sélectionnée au niveau du PAD en l'allumant et en écoutant les premiers messages.

- Patient adulte/patient enfant
- Appelez les services d'urgence

Lorsque vous êtes certain d'avoir installé la bonne langue, vous pouvez éteindre l'appareil.

UTILISATION DU LOGICIEL Saver EVO AVEC LE PDU

Pour utiliser le logiciel Saver EVO avec la carte-mémoire du samaritan PDU, vous devez insérer la carte dans un lecteur de carte compatible SD/MMC connecté à ou intégré au PC exécutant le logiciel Saver EVO. Veuillez noter qu'il faut quelques secondes à une minute pour que le système d'exploitation de votre ordinateur reconnaisse qu'une carte se trouve dans le lecteur.



Cliquez sur le bouton 'PDU'. Le sous-menu ci-dessous s'affichera à l'écran :



Données du PDU - Pour récupérer les données de la carte-mémoire du PDU. Pour plus de détails, voir page 13.



Modifier les paramètres du PDU – Pour visualiser les paramètres de configuration du PDU. Pour plus de détails, voir page 15.



Retour - Pour revenir à l'écran de démarrage du logiciel Saver EVO.

RECUPERATION DES DONNEES DE LA CARTE-MEMOIRE DU PDU

Assurez-vous que la carte-mémoire du PDU est bien insérée dans le lecteur de carte SD/MMC, puis



cliquez sur le bouton 'Données du PDU'. Cela permettra de lister tous les événements enregistrés sur la carte-mémoire.



Ecran des événements du PDU sur Saver EVO

Les événements précédés du symbole de l'horloge 🕒 sont les autotests réussis du PDU.

Les événements indiqués en vert et précédés du symbole ✓ sont les événements déjà enregistrés sur le PC.



Tout enregistrer – En mode PDU, ce bouton est désactivé.



Afficher – Pour visualiser l'évènement sélectionné. Pour plus de détails, voir page 14.



Supprimer / Effacer – En mode PDU, ce bouton est désactivé.




Retour – Pour revenir à l'écran d'accès au PDU du logiciel Saver EVO.

AFFICHAGE DES EVENEMENTS DE DEFIBRILLATION ENREGISTRES SUR LE PDU

Pour afficher un évènement, sélectionnez l'évènement voulu parmi ceux de la liste et cliquez sur le

bouton 'Afficher' .

L'évènement de défibrillation avec tracé ECG et la liste des évènements s'afficheront sur le même écran.

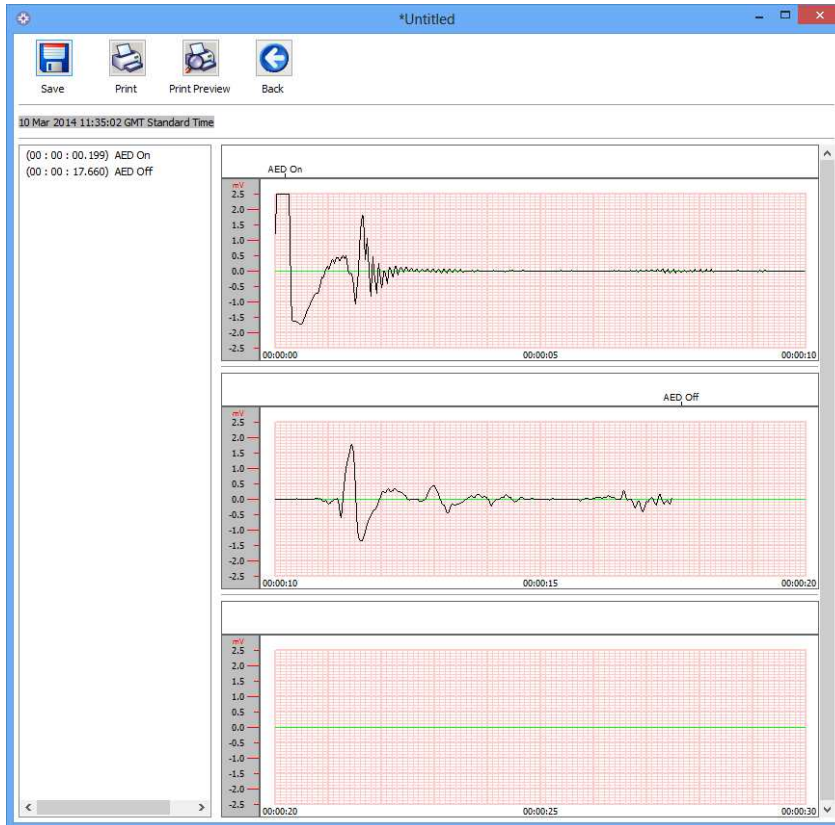


Ecran d'affichage des évènements du PDU sur Saver EVO

Vous pouvez maintenant choisir d'enregistrer l'évènement affiché sur votre PC en cliquant sur le

bouton 'Enregistrer' .

A ce stade vous pourrez entrer des informations sur le patient pour pouvoir l'identifier sur la liste des évènements sauvegardés. Les informations relatives au patient peuvent être composées de caractères alpha numériques, et chaque champ peut être complété ou laissé vierge si nécessaire.

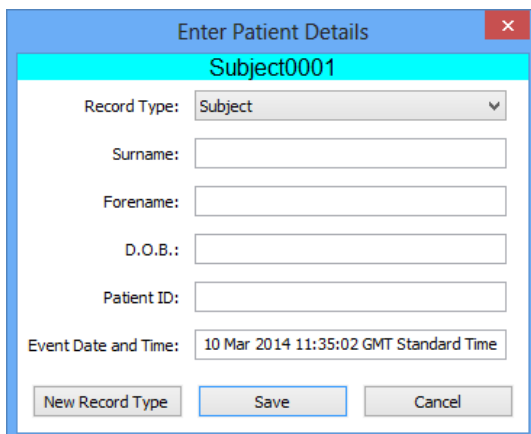

The screenshot shows a dialog box titled 'Enter Patient Details' with a close button (X) in the top right corner. The dialog box has a cyan header bar with the text 'Subject0001'. Below the header, there are several input fields: 'Record Type:' with a dropdown menu showing 'Subject'; 'Surname:' with an empty text box; 'Forename:' with an empty text box; 'D.O.B.:' with an empty text box; and 'Patient ID:' with an empty text box. At the bottom, there is a label 'Event Date and Time:' followed by a text box containing '10 Mar 2014 11:35:02 GMT Standard Time'. At the very bottom of the dialog box, there are three buttons: 'New Record Type', 'Save', and 'Cancel'.

Ecran des informations patient du DEA sur Saver EVO

L'écran d'affichage des événements du logiciel Saver EVO contient également les boutons suivants :



Imprimer événement – Pour imprimer l'évènement en cours de visualisation sur l'écran d'affichage.



Aperçu avant impression – Pour obtenir un aperçu des données à imprimer affichées à l'écran.




Retour – Pour revenir à l'écran des événements du PDU du logiciel Saver EVO.

AFFICHAGE DES PARAMETRES DU PDU



Cliquez sur le bouton 'Afficher les paramètres' pour accéder à l'écran ci-dessous. A partir de cet écran, vous pouvez afficher la charge de la batterie, le volume des haut-parleurs, la langue, les paramètres du métronome, la séquence et la durée de RCP, la date d'expiration, la version du logiciel et le numéro de série du PDU. Ces paramètres peuvent être visualisés mais pas modifiés.

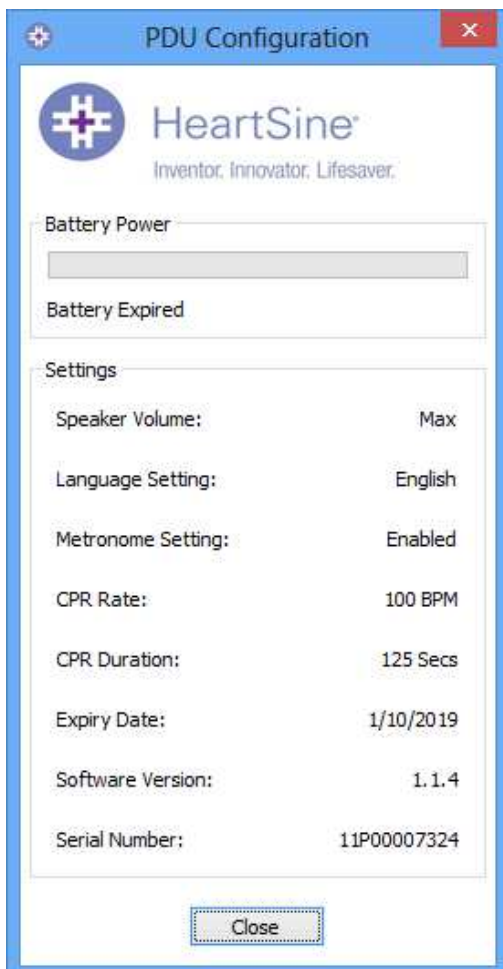

Ecran d'affichage des paramètres du PDU sur Saver EVO

UTILISATION DU LOGICIEL Saver AVEC DES EVENEMENTS ENREGISTRES



Le bouton 'Gérer les événements enregistrés' de l'écran principal du logiciel Saver EVO permet de revoir les données qui ont été téléchargées à partir du samaritan PAD, de la batterie du samaritan Data-Pak ou de la carte-mémoire du PDU et sauvegardées sur l'ordinateur. Cliquez sur ce bouton pour accéder à l'écran ci-dessous :




Sélectionnez un événement parmi ceux de la liste et cliquez sur le bouton 'Afficher' pour ouvrir l'évènement enregistré et visualiser le tracé ECG et le journal des événements.

Exportation et importation

Le logiciel Saver EVO dispose de fonctions permettant l'envoi et la réception de données de défibrillation provenant d'autres utilisateurs du logiciel Saver EVO. Pour envoyer ou recevoir des copies d'évènements sauvegardés, utilisez les fonctions 'Exporter' et 'Importer' du logiciel Saver EVO.

Pour exporter des événements :

1. A partir de l'écran de gestion des événements enregistrés, sélectionnez l'évènement ou les événements que vous souhaitez exporter, puis cliquez sur le bouton 'Exporter' .
2. Votre PC vous demandera de choisir où vous souhaitez enregistrer le fichier exporté et vous permettra également de le nommer.
3. Cliquez sur le bouton 'Enregistrer' pour sauvegarder le fichier à l'emplacement choisi.

Vous pourrez maintenant facilement joindre ce fichier à un e-mail via votre logiciel de messagerie habituel et envoyer le fichier exporté à un autre utilisateur du logiciel Saver EVO.

Les données d'évènements du logiciel Saver EVO ne peuvent être visualisées que par un autre utilisateur de ce logiciel. Les anciennes versions du logiciel Saver ne pourront pas importer et afficher les données provenant du logiciel Saver EVO correctement.

Pour importer des évènements :

Pour importer des évènements et les visualiser sur votre PC, vous devez sauvegarder le fichier qui vous a été envoyé par un autre utilisateur du logiciel Saver ou Saver EVO sur votre PC.

1. A partir de l'écran de gestion des évènements enregistrés, cliquez sur le bouton 'Importer'



2. Naviguez jusqu'à l'emplacement où vous avez sauvegardé le fichier et cliquez sur 'Ouvrir'.
3. Les enregistrements seront ajoutés à la liste des fichiers du logiciel Saver EVO enregistrés sur votre ordinateur.

Ces enregistrements peuvent être visualisés en sélectionnant l'évènement voulu parmi ceux de la liste et en appuyant sur 'Afficher'.

Le logiciel Saver EVO importera et affichera correctement les données d'évènements exportées de la version précédente du logiciel, appelée Saver.

Pour supprimer des évènements enregistrés :

Les évènements enregistrés peuvent être supprimés de la mémoire de votre ordinateur via le logiciel Saver EVO. Les évènements peuvent être supprimés individuellement en sélectionnant tout simplement le ou les évènements à supprimer (sélections multiple autorisées).

Une fois que vous aurez confirmé que seuls les évènements sélectionnés sont à supprimer, cliquez



sur le bouton 'Supprimer / Effacer'. Par précaution, Saver EVO vous demandera votre mot de passe avant l'effacement de la mémoire. Une fois le mot de passe correct entré, les évènements sélectionnés seront supprimés de la mémoire.


Attention : HeartSine recommande de sauvegarder l'ensemble de la mémoire sur votre ordinateur avant de l'effacer, les données ne pouvant être récupérées une fois supprimées.


MODIFICATION DU MOT DE PASSE ET DE LA LANGUE DU LOGICIEL Saver EVO

Le logiciel Saver EVO dispose de fonctions ne pouvant être modifiées que par l'entrée d'un mot de passe. Cela permet aux administrateurs du logiciel de limiter l'accès à certaines fonctionnalités aux utilisateurs autorisés. Le logiciel Saver EVO est fourni avec comme mot de passe le mot « password » par défaut.

Pour modifier le mot de pass :



A partir de l'écran principal du logiciel Saver EVO, cliquez sur le bouton  pour accéder à l'écran ci-dessous :

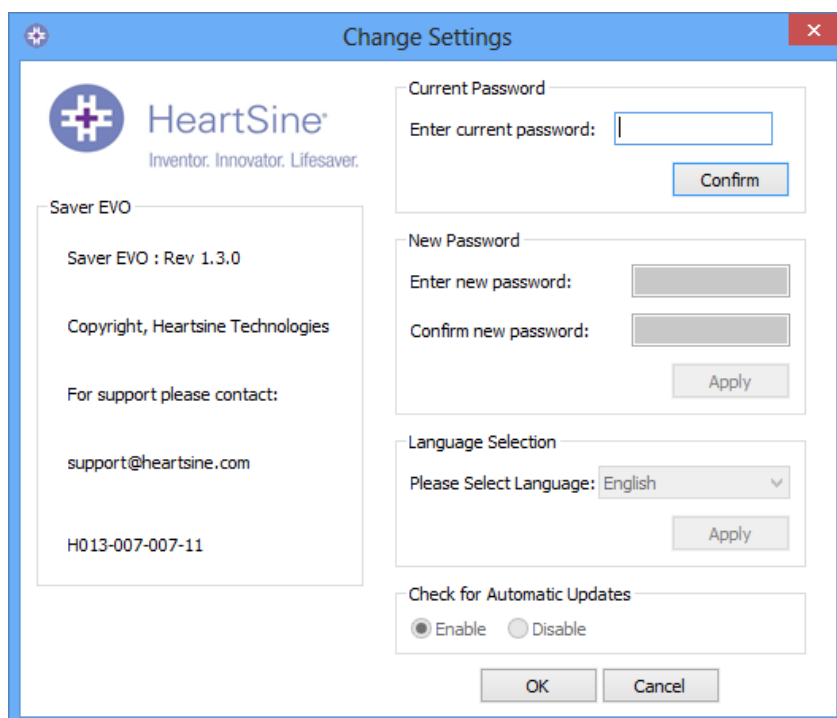


Entrez le mot de passe actuel et cliquez sur « Confirmer ». Cela vous permettra d'entrer et de confirmer un nouveau mot de passe.

Cliquez sur « Appliquer » pour effectuer le changement. La modification du mot de passe sera confirmée à l'écran. Cliquez sur OK dans cette fenêtre puis à nouveau sur OK dans la fenêtre de modification du mot de passe pour quitter cette fonction.


Veillez noter que si vous réinstallez Saver EVO, cela réinitialisera le mot de passe. Cependant, cela ne supprimera aucun des événements de données précédemment enregistrés.

Sélection de la langue

Pour modifier la langue du logiciel Saver EVO, sélectionnez la langue voulue parmi celles du menu déroulant et cliquez sur 'Appliquer'.

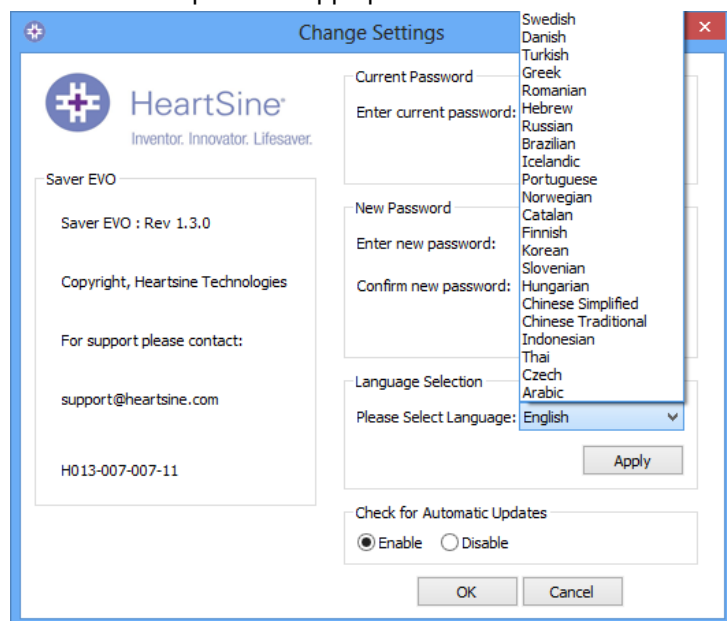

En cliquant sur 'Appliquer' l'écran suivant apparaîtra et vous devrez relancer le logiciel Saver EVO pour que la modification de la langue soit prise en compte.

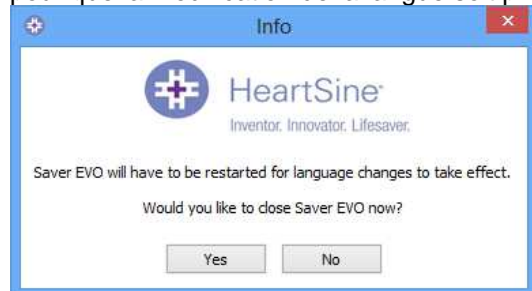

Mises à jour automatiques

Si la case Activé est cochée, à chaque fois que Saver EVO sera lancé, le logiciel essaiera de se connecter au site de Heartsine pour vérifier s'il existe des versions plus récentes de Saver EVO. Si une mise à jour est à disposition au moment du lancement de Saver EVO, la fenêtre suivante apparaîtra à l'écran.



Cliquez sur Oui si vous souhaitez télécharger la nouvelle version de Saver EVO ou Non dans le cas contraire.