



HeartSine samaritan® PAD
SAM 500P Trainer
modell TRN-500-1
Användarhandbok

Denna användarhandbok innehåller anvisningar om hur man använder HeartSine samaritan PAD 500P Trainer.

HeartSine samaritan PAD 500P Trainer är en icke-medicinsk apparat som är avsedd att användas för att utbilda livräddare i korrekt användning av HeartSine samaritan PAD 500P automatiska externa defibrillator. Trainern har ingen terapeutisk kapacitet och får inte användas för livräddning.



VIKTIGT: För att undvika förväxling vid verklig livräddning ska Trainern inte förvaras eller lämnas kvar nära HeartSine samaritan PAD 500P automatiska externa defibrillator.

För snabb och enkel identifikation har HeartSine samaritan PAD 500P Trainer ett användargränssnitt med gult frontmembran medan HeartSine samaritan PAD 500P automatiska externa defibrillator har ett marinblått/svart frontmembran.

HeartSine rekommenderar att användarna av defibrillatorerna måste vara utbildade i hjärt-lungräddning med defibrillator (HLR-D). HeartSine samaritan PAD 500P Trainer är avsedd att användas av godkända HLR-D-utbildningsanordnare för detta ändamål.


HeartSine samaritan PAD 500P Trainer är fabriksinställd för funktion i enlighet med de gemensamma riktlinjerna för HLR från American Heart Association/European Resuscitation Council 2015. Apparaten kommer med sex förprogrammerade situationsscenarier, baserat på dessa riktlinjer.

Om HLR-riktlinjerna ändras kommer programvara att finnas tillgänglig för att uppgradera HeartSine samaritan PAD 500P Trainer så att den uppfyller kraven. Kontakta HeartSines auktoriserade återförsäljare eller HeartSine Technologies direkt.

När HeartSine samaritan PAD 500P Trainer är påslagen får du röstmeddelanden parallellt med visuella indikatorer. HeartSine samaritan PAD 500P Trainer kan också styras med medföljande fjärrkontroll.

Kontakta auktoriserad HeartSine-distributör för en lista över reservtillbehör.

- 1) Kontrollera att HeartSine samaritan PAD 500P Trainer är fulladdad (se avsnittet Laddning i denna manual).
- 2) Placera HeartSine samaritan PAD 500P Trainer och Trainer-Pak™ på en plan yta. Skjut in Trainer-Pak i öppningen på HeartSine samaritan PAD 500P Trainer och lyssna efter klicket som bekräftar att det sitter ordentligt på plats.
- 3) Placera batterierna som medföljer Trainern i HeartSine samaritan PAD 500P fjärrkontroll.


 Tryck inte på några knappar medan du sätter in fjärrkontrollbatterierna eftersom det återställer fjärrkontrollens ID.

- 4) Tryck på På/Av-knappen på HeartSine samaritan PAD 500P Trainer och lyssna efter röstmeddelanden för att säkerställa att apparaten fungerar.
- 5) Om HeartSine samaritan PAD 500P Trainer inte är tillräckligt laddad fungerar den inte som den ska. När den är påslagen blinkar statusindikatorn rött och anger att apparaten måste laddas. Om batteriet är helt tomt startar inte apparaten alls. Anvisningar om laddning finns i avsnittet Ladda i denna manual.

Starta och stänga av HeartSine samaritan PAD 500P Trainer


Starta HeartSine samaritan PAD 500P Trainer genom att trycka på den gröna På/Av-knappen.




 Som standard fungerar Trainer med senast använda inställning.

Stäng av HeartSine samaritan PAD 500P Trainer genom att trycka på På/Av-knappen igen.

När HeartSine samaritan PAD 500P Trainer är påslagen går det att stänga av den med medföljande fjärrkontroll. Stäng av Trainern genom att trycka på Av-knappen (röd knapp) på fjärrkontrollen.

 När den är påslagen stängs HeartSine samaritan PAD 500P Trainer automatiskt av efter femton minuter om apparaten inte används.

HeartSine samaritan PAD 500P Trainer

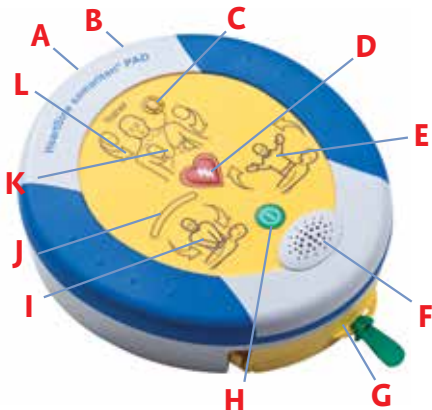

- A Dataport
- B Lysdiod för batteristatus
- C Statusindikator
- D Chockknapp
- E Rör inte-indikator
- F Högtalare
- G Trainer-Pak-kassett
- H På/Av-knapp
- I Säkert att vidröra-indikator
- J HLR-indikator
- K Indikator för paddelplacering
- L Åtgärdspilar



På/av-knapp

Tryck på knappen för att sätta på och stänga av apparaten. (Om du trycker på den när en chock ska avges får du varningsmeddelandet "Varning, Av-knappen nedtryckt". Apparaten stängs inte av om du inte trycker på av-knappen igen ino tre sekunder.)



Indikator för paddelplacering

Åtgärdspilarna runt denna ikon blinkar för att instruera användaren om att PAD 500P-paddlarna måste fästas på patienten på anvisat sätt.



Säkert att vidröra-indikator

Det är säkert att vidröra patienten när åtgärdspilarna runt denna ikon blinkar. Genomför HLR eller kontrollera patienten.



Statusindikator

Blinkar grönt - Trainern är klar för användning
Blinkar rött - Trainern måste laddas



Åtgärdspilar

Åtgärdspilarna runt en ikon blinkar för att ange vilka åtgärder användaren bör utföra.



Rör inte-indikator

Vidrör inte patienten när åtgärdspilarna runt denna ikon blinkar. PAD 500P kan analysera patientens hjärtrytm eller förbereda för chockleverans.



Chockknapp

Tryck på knappen för att simulera en terapeutisk chock.



HLR-indikator

Det finns ett antal lampor som ger en graderad indikation på vilken kraft som används under HLRkompressionerna. När gröna lampor tänds anses kompressionerna ha tillräcklig kraft.


Använda elektroder

Utbildningssituationerna omfattar röstmeddelanden om att ta bort elektroderna från Trainer-Pak och placera elektrodpaddlarna på avsett vis. Följ stegen nedan om du blir ombedd att göra detta.

- 1) Dra i den gröna fliken för att öppna kassetten i Trainer-Pak och få full längd på elektrodablarna.
- 2) Ta bort skydden från elektrodpaddlarna.
- 3) Placera elektrodpaddlarna enligt indikatorn för paddelplacering. Elektrodpaddlarna för sternum och apex är tydligt angiven på respektive paddel.
- 4) Tryck fast paddlarna ordentligt för att säkerställa tillräcklig kontakt.

Linda upp elektroderna efter användning

- 1) Sätt tillbaka skydden på elektrodpaddlarna eller byt ut dem mot nya paddlar.
- 2) Vik ihop paddlarna så att skyddet finns på utsidan.
- 3) Låt elektroderna hänga från apparaten och använd handtaget i den blå spolmekanismen för att linda upp elektroderna helt och hållet.

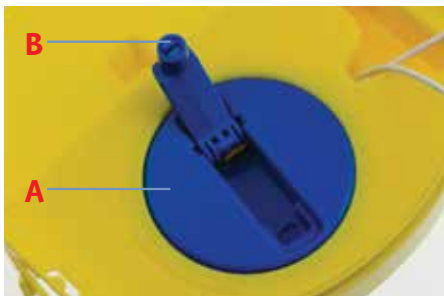


A Spolmekanism

B Spolhandtag

- 4) Placera paddlarna ovanpå Trainer-Pak-kassetten och kontrollera att ledningarna ligger nedanför paddlarna.
- 5) Stäng Trainer-Pak-kassetten genom att skjuta in den gula brickan på plats.

Fjärrkontroll för HeartSine samaritan PAD 500P Trainer

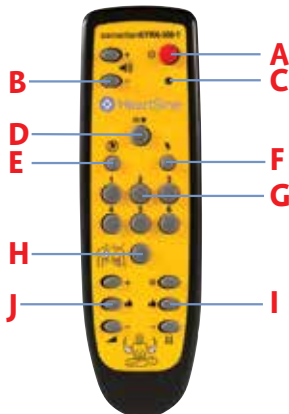


- A**
- B**
- C**
- D**
- E**
- F**
- G**
- H**
- I**
- J**

- A** Av-knapp
- B** Volymskontroll
- C** Indikator för låg batteriladdning
- D** Pausknapp
- E** Avge ingen chock-situation
- F** Avge chock-situation
- G** Välj situation
- H** Fästa elektrodspaddlar
- I** Frekvensreglage för HLRrådgivaren
- J** Kraftreglage för HLRrådgivaren



Stänga av Trainern

Det går att stänga av HeartSine samaritan PAD 500P Trainer med fjärrkontrollen. Stäng av Trainern genom att trycka på fjärrkontrollens röda knapp.

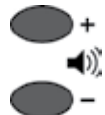


Ändra volymen

Det finns fyra volyminställningar på HeartSine samaritan PAD 500P Trainer. Volymsreglagen finns till vänster om Av-knappen på fjärrkontrollen. Höj volymen genom att trycka på "+"-knappen och sänk den genom att trycka på "-"-knappen.



Göra paus i Trainer

Under övningen går det att pausa HeartSine samaritan PAD 500P Trainer. Pausa Trainern genom att trycka på pausknappen (||/▶). Trainern är i pausläge tills pausknappen trycks ned igen och fortsätter sedan att spela upp den valda situationen.

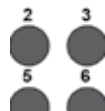

Byta situation

HeartSine samaritan PAD 500P Trainer levereras med sex förprogrammerade övnings-situationer. (För information om situationer, se avsnittet om övnings-situationer i denna manual.) Det går att byta situation genom att trycka på motsvarande sifvertangent på fjärrkontrollen, dvs "3" betyder övnings-situation 3.

När man bytt situation fungerar apparaten på det vis som anges i situationsavsnittet. Apparaten blir kvar i denna situation tills man väljer en ny situation.

Det finns sex förprogrammerade övningsituationer på HeartSine samaritan PAD 500P Trainer att välja mellan. Alla förprogrammerade situationer baseras på riktlinjerna AHA/ERC 2015. Information om situationerna anges nedan.

Situation 1

1. Inställningsläge - "Ring 112", "Dra i grön flik", etc
2. Användarens åtgärd - Tryck på paddelknappen för att bekräfta elektrodernas placering
3. Övervakningsläge - "Fastställer hjärtrytm", "Rör inte patienten", etc
4. Avge chock - Användaren ska trycka på chockknappen
5. HLR-läge - Användaren ska utföra HLR efter anvisningarna
6. Övervakningsläge - "Fastställer hjärtrytm", "Rör inte patienten", etc
7. Avge ingen chock
8. HLR-läge - Användaren ska utföra HLR efter anvisningarna
9. Upprepa - Steg 6 till 8 upprepas tills man trycker på På/Av-knappen

Situation 2

1. Inställningsläge - "Ring 112", "Dra i grön flik", etc
2. Användarens åtgärd - Tryck på paddelknappen för att bekräfta elektrodernas placering
3. Övervakningsläge - "Fastställer hjärtrytm", "Rör inte patienten", etc
4. Avge ingen chock
5. HLR-läge - Användaren ska utföra HLR efter anvisningarna
6. Övervakningsläge - "Fastställer hjärtrytm", "Rör inte patienten", etc
7. Avge chock - Användaren ska trycka på chockknappen
8. HLR-läge - Användaren ska utföra HLR efter anvisningarna
9. Upprepa - Steg 6 till 8 upprepas tills man trycker på På/Av-knappen

Situation 3

1. Elektroder - Apparaten antar att elektroderna redan är fastsatta
2. Övervakningsläge - "Fastställer hjärtrytm", "Rör inte patienten", etc
3. Kontrollera paddlar - "Kontrollera paddlar"
4. Användarens åtgärd - Tryck på paddelknappen för att bekräfta elektrodernas placering
5. Övervakningsläge - "Fastställer hjärtrytm", "Rör inte patienten", etc
6. Avge chock - Användaren ska trycka på chockknappen
7. HLR-läge - Användaren ska utföra HLR efter anvisningarna
8. Övervakningsläge - "Fastställer hjärtrytm", "Rör inte patienten", etc
9. Avge ingen chock
10. HLR-läge - Användaren ska utföra HLR efter anvisningarna
11. Upprepa - Steg 3 till 10 upprepas tills man trycker på På/Av-knappen

Situation 4

1. Elektroder - Apparaten antar att elektroderna redan är fastsatta
2. Övervakningsläge - "Fastställer hjärtrytm", "Rör inte patienten", etc
3. Avge chock - Användaren ska trycka på chockknappen
4. HLR-läge - Användaren ska utföra HLR efter anvisningarna
5. Övervakningsläge - "Fastställer hjärtrytm", "Rör inte patienten", etc
6. Avge chock - Användaren ska trycka på chockknappen
7. HLR-läge - Användaren ska utföra HLR efter anvisningarna
8. Övervakningsläge - "Fastställer hjärtrytm", "Rör inte patienten", etc
9. Avge ingen chock
10. HLR-läge - Användaren ska utföra HLR efter anvisningarna
11. Upprepa - Steg 5 till 10 upprepas tills man trycker på På/Av-knappen

Situation 5

Situation 5 är densamma som situation 1 med tillägget av röstmeddelanden om när konstgjord andning ska ges i HLR-läge.

1. Inställningsläge - "Ring 112", "Dra i grön flik", etc
2. Användarens åtgärd - Tryck på paddelknappen för att bekräfta elektrodernas placering
3. Övervakningsläge - "Fastställer hjärtrytm", "Rör inte patienten", etc
4. Avge chock - Användaren ska trycka på chockknappen
5. HLR-läge - Användaren ska utföra HLR efter anvisningarna, t.ex. en ljudangivelse om när konstgjord andning ska ges - metronomen växlar från ett pip ljud till ett klickljud under tio kompressioner.
6. Övervakningsläge - "Fastställer hjärtrytm", "Rör inte patienten", etc
7. Avge ingen chock
8. HLR-läge - Användaren ska utföra HLR efter anvisningarna, t.ex. en ljudangivelse om när konstgjord andning ska ges - metronomen växlar från ett pip ljud till ett klickljud under tio kompressioner.
9. Upprepa - Steg 6 till 8 upprepas tills man trycker på På/Av-knappen

Situation 6

Situation 6 är densamma som situation 2 med tillägget med röstmeddelanden om när man ska sätta igång andningen i HLR-läge.

1. Inställningsläge - "Ring 112", "Dra i grön flik", etc
2. Användarens åtgärd - Tryck på paddelknappen för att bekräfta elektrodernas placering
3. Övervakningsläge - "Fastställer hjärtrytm", "Rör inte patienten", etc
4. Avge ingen chock
5. HLR-läge - Användaren ska utföra HLR efter anvisningarna, t.ex. en ljudangivelse om när konstgjord andning ska ges - metronomen växlar från ett pipljud till ett klickljud under tio kompressioner.
6. Övervakningsläge - "Fastställer hjärtrytm", "Rör inte patienten", etc
7. Avge chock - Användaren ska trycka på chockknappen
8. HLR-läge - Användaren ska utföra HLR efter anvisningarna, t.ex. en ljudangivelse om när konstgjord andning ska ges - metronomen växlar från ett pipljud till ett klickljud under tio kompressioner.
9. Upprepa - Steg 6 till 8 upprepas tills man trycker på På/Av-knappen

Fjärrkontrollen ger utbildningsanordnaren möjlighet att kontrollera situationen manuellt. När HeartSine samaritan PAD 500P Trainer är påslagen fungerar den enligt de angivna övningsituationerna. Utbildningsanordnarna kan åsidosätta detta genom att trycka på knappen 'Avge chock', 'Avge inte chock' eller 'Fäst elektrodpaddlar'.



Avge chock

Tryck på knappen "Avge chock" för att få HeartSine samaritan PAD 500P Trainer att åsidosätta vald övningsituation och simulera en chockbar rytm. Varje efterföljande analysperiod anger att en chock ska avges tills antingen Trainern stängs av eller tills man trycker på knappen "Avge ingen chock" på fjärrkontrollen.



Avge ingen chock

Tryck på knappen "Avge ingen chock" för att få HeartSine samaritan PAD 500P Trainer att åsidosätta vald övningsituation och simulera en icke-chockbar rytm. Varje efterföljande analysperiod anger att ingen chock ska avges tills antingen Trainern stängs av eller man trycker på knappen 'Avge chock' på fjärrkontrollen.



Fästa elektrodpaddlar

Om man trycker på knappen 'Fäst elektrodpaddlar' spelar Trainern upp meddelandet 'Fäst elektroderna' under operationens analysperiod. Trainern fortsätter att spela upp röstmeddelandet 'Fäst elektroderna' tills man trycker på knappen 'Fäst elektrodpaddlar' igen.

HeartSine samaritan PAD med HLR-rådgivare modell 500P

HeartSine samaritan PAD 500P automatiska externa defibrillator innehåller en HLR-feedbackmodul som kallas 'HLR-rådgivaren'. HeartSine samaritan PAD 500P använder HLR-rådgivarfunktionen för att ge enkel feedback på kvaliteten på den HLR som utförts av livräddarna. Vid behov uppmanas livräddaren att trycka hårdare tills man får tillräcklig kompressionskraft.

Om HLR-rådgivaren tycker att kompressionerna har tillräcklig kraft analyserar den frekvensen med vilken kompressionerna utförs. Livräddaren uppmanas efter behov att trycka snabbare eller långsammare.


Om HLR utförs med tillräcklig kraft och frekvens avger HeartSine samaritan PAD 500P meddelandet 'Bra kompressioner'.

Alla röstmeddelanden medföljs av visuella meddelanden på HLR-indikatorikonen.

HLR-rådgivarutbildning

Utbildningsanordnarna kan simulera funktionen HLR-rådgivare på HeartSine samaritan PAD 500P Trainer med hjälp av fjärrkontrollen. Utbidninganordnare måste iaktta den HLR som utförs av livräddarna som utbildas, och baserat på observationer trycka på lämplig knapp.

HeartSine samaritan PAD 500P Trainer antar initialt att korrekta kompressioner utförs och spelar upp ljudmeddelandet:

 ”Bra kompressioner”

Knapparna för HLR-kontroll finns längst nere på fjärrkontrollen. Knapparna till vänster används för att ange frekvensen med vilken eleven utför kompressioner och knapparna till höger används för att ange kraften med vilken kompressionerna utförs.

Kompressionsfrekvens

Snabba kompressioner

Korrekt frekvens

Långsamma kompressioner



Kompressionskraft

Börja HLR / Inga kompressioner

God kraft

Otillräcklig kraft

Kompressionskraft

HeartSine samaritan PAD 500P Trainer kan härma HLR-rådgivaren på HeartSine samaritan PAD 500P-defibrillatorn.



HLR inte startat

Om eleven inte börjat utföra HLR trycker du på knappen 'Inga kompressioner'. HeartSine samaritan PAD 500P Trainer spelar upp röstmeddelandet:

 ”Tryck hårdare. Tryck hårdare. Starta HLR”



'HLR-indikator' på HeartSine samaritan PAD 500P Trainer har en enstaka blinkande orange lampa, som visas i bilden. Eleven måste påbörja HLR omedelbart.



Kompressioner inte tillräckligt hårda

Om eleven har startat HLR men inte använder tillräcklig kraft trycker du på knappen 'Ottillräcklig kraft'. HeartSine samaritan PAD 500P Trainer spelar upp röstmeddelandet:



"Tryck hårdare"



'HLR-indikator' på HeartSine samaritan PAD 500P Trainer blinkar orange på följande vis. Eleven uppmanas att trycka hårdare.



God kompressionskraft

Om eleven utför kompressioner med tillräckligt djup trycker du på knappen 'Bra kraft'. Ikonen för HLR-indikator blinkar nu med alla lamporna (orange och gröna), som visas i bilden.



HeartSine samaritan PAD 500P Trainer avger inte längre meddelanden om kraften med vilken kompressionerna avges:



"Bra kompressioner"

Kompressionsfrekvens

HeartSine samaritan PAD 500P Trainer kan hämta funktionen HLR-rådgivare på HeartSine samaritan PAD 500P-defibrillatorn. Här följer anvisningarna om hur man simulerar kompressionsfrekvensen.



Kompressioner för långsamma

Om eleven utflör kompressionerna för långsamt trycker du på knappen 'Långsamma kompressioner'. HeartSine samaritan PAD 500P Trainer spelar upp uppmaningen:



"Tryck snabbare"



Kompressioner för snabba

Om eleven utflör kompressionerna för snabbt trycker du på knappen 'Snabba kompressioner'. HeartSine samaritan PAD 500P Trainer spelar upp uppmaningen:



"Tryck långsammare"



Kompressioner rätt frekvens

Om eleven utför kompressioner med rätt frekvens trycker du på knappen 'Korrekt frekvens'. HeartSine samaritan PAD 500P Trainer spelar upp meddelandet om bra kompression.

Batterihantering för HeartSine samaritan PAD 500P Trainer

HeartSine samaritan PAD 500P Trainer innehåller ett uppladdningsbart batteri. Säkerställ att HeartSine samaritan PAD 500P Trainer är fulladdat innan övningsaktiviteterna påbörjas.

När HeartSine samaritan PAD 500P Trainer är fulladdat går det att använda den i cirka sju timmar innan den måste laddas på nytt.

HeartSine samaritan PAD 500P Trainer övervakar batteriets kapacitet allt eftersom det närmar sig urladdning. Minst en timme innan batteriet laddas ur Trainern får du följande meddelande:



”Varning. Lågt batteri”

Om en varningssignal avges går det att använda HeartSine samaritan PAD 500P Trainer under en begränsad period. Om batteriet laddas ur helt stänger Trainern av sig själv. Om detta händer måste Trainer laddas upp.

Ladda och ladda upp HeartSine samaritan PAD 500P Trainer

Ladda eller ladda upp HeartSine samaritan PAD 500P Trainer på ett säkert sätt genom att följa anvisningarna nedan:

- 1) Sätt in laddningsadaptern i uttaget på sidan av HeartSine samaritan PAD 500P Trainer. Kontrollera att adaptorn sitter ordentligt på plats.
- 2) Plugga in laddaren i elnätet.
- 3) Lämnna Trainern för uppladdning. Lysdioden för batteristatus (bredvid uttaget) lyser rött under laddning och blinkar när laddningen är nästan klar. När laddningen är klar slocknar lysdioden. Laddning av en urladdad HeartSine samaritan PAD 500P Trainer tar max sex timmar.
- 4) Ta bort adaptorn från HeartSine samaritan PAD 500P Trainer. Sätt på Trainern för att säkerställa att apparaten fungerar.

Om HeartSine samaritan PAD 500P Trainer sätts på under laddningen måste laddaren stängas av och sättas på igen för att starta om snabb laddning.

HeartSine samaritan PAD 500P Trainer får endast laddas med medföljande laddare. Vid användning av en annan laddare upphävs garantin och det kan leda till skada på HeartSine samaritan PAD 500P Trainer.

HeartSine samaritan PAD 500P Trainer och laddaren är endast avsedda för inomhusbruk. Får inte användas i våta eller fuktiga miljöer.


Det finns inga delar som användaren kan serva inuti HeartSine samaritan PAD 500P Trainer, Trainer-Pak eller laddaren. Dessa produkter får inte öppnas. Om det mot förmodan skulle uppstå fel ska återförsäljaren omedelbart kontaktas.

Fjärrkontrollbatterier

Fjärrkontrollen för HeartSine samaritan PAD 500P Trainer innehåller en varningsindikator för låg batteriladdning. Om denna indikator blinkar rött två gånger, när en fjärrkontrollknapp tryckts ned, betyder det att batterierna i fjärrkontrollen måste bytas ut.

Fjärrkontrollen använder två AAA-batterier av standardtyp.

Det går att komma åt batterierna genom att ta bort batteriluckan på fjärrkontrollens baksida.

 Vid insättning av batterierna i fjärrkontrollen under intryckning av Av-knappen går fjärrkontrollen in i parningsläge och får ett nytt transmissions-ID. Detta blir ett annat än det som tidigare lagrats på Trainern. Om detta inträffar måste man utföra en ny fullständig parningsprocedur för att para om fjärrkontrollen och HeartSine samaritan PAD 500P Trainern. Normalt batteribyte orsakar inget problem eftersom parningen endast sker om man trycker ned Av-knappen.

Konfigurationsverktyg för HeartSine samaritan PAD 500P Trainer

Konfigurationsverktyget för HeartSine samaritan PAD 500P Trainer är en programvara som går att ladda ner kostnadsfritt från HeartSine hemsida (www.heartsine.com). Denna programvara ger dig möjlighet att uppdatera Trainern. Följande alternativ finns tillgängliga:

Språk

HeartSine samaritan PAD 500P Trainer går att programmera om för att få röstmeddelandena på ett av flera olika språk. Ladda ner aktuell användarhandbok till konfigurationsverktyget för HeartSine samaritan PAD 500P Trainer från HeartSines hemsida med anvisningar om hur man gör detta.

Para en fjärrkontroll med HeartSine samaritan PAD 500P Trainer

Varje HeartSine samaritan PAD 500P Trainer har en specifik fjärrkontroll som fungerar tillsammans med den. Detta gör att flera apparater kan användas nära varandra utan störning. Om det osannolika skulle inträffa att fjärrkontrollen inte fungerar med Trainern måste den paras med Trainern igen.

Använd konfigurationsverktyget för HeartSine samaritan PAD 500P Trainer för att para en fjärrkontroll med Trainern. Fullständiga anvisningar finns i medföljande användarhandbok.

Apparatidentifikationer

Varje HeartSine samaritan PAD 500P Trainer får ett identifikationsnummer mellan 001 och 255 under tillverkningen. Fjärrkontrollen för varje Trainer får sedan samma identifikationsnummer. Om det osannolika skulle inträffa att två apparater med samma ID-nummer används samtidigt kan konfigurationsverktyget för HeartSine samaritan PAD 500P Trainer tilldela nya nummer till apparaterna. Apparaten måste paras med sin fjärrkontroll efter tilldelning av ett nytt ID-nummer.

Följande är en kort översikt över grunderna för HLR för icke-professionella livräddare, i enlighet med American Heart Association (AHA) och European Resuscitation Council (ERC) i deras 2015 publicerade riktlinjer för HLR och ECC. Detta är endast avsett som en snabb referens för utbildade HLR-användare. HeartSine rekommenderar att alla potentiella användare av HeartSine samaritan PAD 500P utbildas av en kompetent utbildningsorganisation i både HLR och HeartSine samaritan PAD 500P, före första användning av en HeartSine samaritan PAD 500P. Om riktlinjerna ändras kommer programvara att finnas tillgänglig för uppdatering av HeartSine samaritan PAD 500P Trainer så att den uppfyller kraven. Kontakta HeartSines auktoriserade återförsäljare eller HeartSine Technologies direkt.

KONTAKTA 112. Skicka för en AED.

Reagerar personen? Prata med personen eller skaka personens axlar. Kontakta 112.




Titta, känn, lyssna.

Öppna luftvägarna och kontrollera andningen.




Utför HLR. Följ senaste AHA- eller ERC-riktlinjerna.

Utför HLR tills en AED är tillgänglig ELLER akutläkare ankommer. Be andra personer att hjälpa dig och alternera HLR.

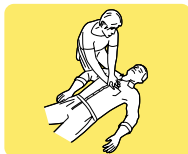

Använd en AED, om sådan finns.

Fortsätt med HLR tills räddningspersonal är på plats. Alternera med en annan person efter en cykel eller 2 minuter.

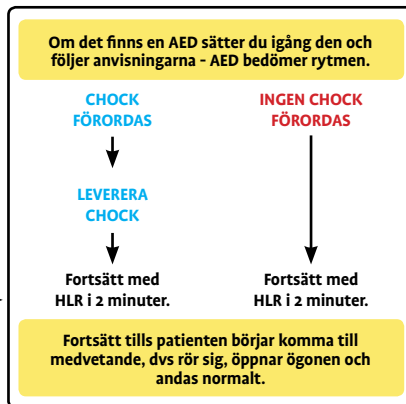

Kasseringsanvisningar

HeartSine samaritan PAD 500P Trainer är en återanvändbar apparat. Om man underhåller apparaten enligt anvisningarna i denna manual har den en garanti på två år från tillverkningsdatum.

Vid kassering av HeartSine samaritan PAD 500P Trainer-apparaten måste den kasseras på lämplig återvinningscentral i enlighet med nationellt och lokalt regelverk. Alternativt kan du returnera apparaten till den lokala återförsäljaren för HeartSine Technologies för kassering.

Kassering inom EU:

Kassera inte HeartSine samaritan PAD 500P Trainer-apparaten som osorterat hushållsavfall. Förvara HeartSine samaritan PAD 500P Trainer separat, för återanvändning eller återvinning av apparaten i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) eller returnera den till den lokala återförsäljaren eller HeartSine Technologies för kassering.

Undantag för garanti

HeartSine Technologies eller auktoriserade återförsäljare är inte skyldiga att utföra service/reparationer under garantitiden om:

- a. Någon utfört oukautoriserade ändringar på apparaten.
- b. Någon använt icke-standardkomponenter.
- c. Användaren inte använt apparaten i enlighet med indikationerna för användning eller medföljande anvisningar i denna manual.
- d. Apparatsens serienummer tagits bort, är oläsligt, förstörts eller ändrats.
- e. Apparaten, elektroderna eller batterierna förvaras eller används operationellt utan hänsyn till miljöspecifikationerna.
- f. Apparaten har testats med ogiltiga metoder eller felaktig utrustning (se avsnittet Underhåll i denna manual).

Eventuella anspråk på garantin måste riktas till återförsäljaren från vilken enheten ursprungligen köptes. Innan service utförs under garantitiden kräver HeartSine Technologies köpbevis. Produkten måste användas i enlighet med användarhandboken och för avsett ändamål. Om du har någon fråga, kontakta heartsinesupport@stryker.com för support.



www.heartsine.com

EMEA/APAC

HeartSine Technologies, Ltd.

203 Airport Road West
Belfast, Nordirland
BT3 9ED

Tel: +44 28 9093 9400

Fax: +44 28 9093 9401

info@heartsine.com



U.S./Americas

HeartSine Technologies LLC

121 Friends Lane, Suite 400
Newtown, PA 18940
Toll Free: (866) 478 7463

Tel: +1 215 860 8100

Fax: +1 215 860 8192

info@heartsine.com



The HeartSine products described in this brochure meet the European Medical Directive requirement.



UL Classified.
See complete marking on product.

H017-001-607-3 SV